



## 杂交箱附件

多种试管规格：具有各种规格可以适合不同通量、用户和应用场合。

- 试管和其他附件可装配组合，适应多种用途
- 杂交探针液量少，即使对大的玻璃试管，特别旋转设计保证了5ml杂交探针液已足够
- 独特的“插入式”试管；试管旋转速度0-20 rpm；可控；以适应多种应用场合
- 新型试管架；每个可容纳16 x 15ml 或8 x 50ml试管
- 安全防辐射，保护套和防渗试管设计，减少用户使用风险
- 变速振动台；转速(0 - 60 rpm)，适合膜/切片相互杂交
- 可调节支脚；即使在地面不平的场合也可使用
- 静止搁架；用于不需要运动的固定加热场合
- 收集托盘；可拆下，易清洁



## 试管

杂交玻璃试管减少了杂交探针的用量，简化清洗工作，提高信号强度!

- 3种规格可选：小型，微型和独特的大试管
- 结实耐用：厚硼硅酸盐玻璃
- 容易倾倒：无渗漏、安全方便
- 密封环：‘O’形环密封端盖，保证没有泄漏!
- 旋盖上有放气螺纹：不会产生真空问题，容易打开
- 试管组件：适配器可夹住多种小玻璃试管，以提高容量




## HB-1D 玻璃管

产品代码	描述
FHB11	大玻璃试管，无端盖
FHB12	大玻璃试管，有端盖
FHB32	小玻璃试管，有旋盖
FHB43	多管支架，用于HB-1D微型试管
FHB41	微型玻璃试管，有旋盖(一套4件)
F15ML1TH	试管架，带试管夹，夹住16 x 15ml 试管 (仅限HB-1D)
F50ML1TH	试管架，带试管夹，夹住8 x 50ml 试管 (仅限HB-1D)



## HB-3D 玻璃管

产品代码	描述
FHB16	大玻璃试管，有端盖
FHB36	小玻璃试管，有旋盖
FHB71	小玻璃试管，不包括旋盖端孔塞(用于FHB70)
FHB70	多用途试管架，用于小试管
FHB72	FHB70多用途试管架和3 x FHB71小玻璃试管，配旋盖
FHB41	微型玻璃试管，配旋盖(一套4件)
FHB61	多用途试管架，用于微型试管
F15ML4TH	试管架，带试管夹，夹住16 x 15ml 试管
F50ML4TH	试管架，带试管夹，夹住8 x 50ml 试管

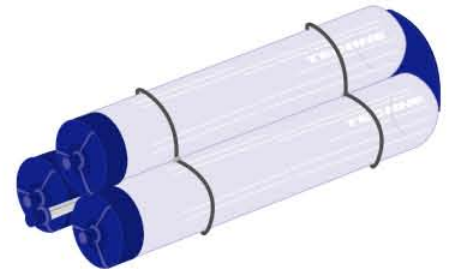



## 杂交箱附件

### 试管架

试管架, 配试管夹, 用于装16 x 15ml 或 8 x 50ml 试管。用于小样品高通量应用。



### 变速振动台

精巧地装在箱体底座上, 允许多根杂交试管置于其上。该振动台用不锈钢制成, 使用波动方式处理膜片。速度范围, 每分钟振动0 - 60 次。

### 静止台架

多达2 (Hybrigene HB-3D) 或3 (Hybridiser HB-1D) 个固定不锈钢网架, 可置入试管定位器中, 使本装置成为一个简易的无运动培养箱。每个架子可承受4kg的重量。

### 膜分隔器

结实, 可重复利用的多孔网板, 用于放置在膜之间。保证在处理一个试管中的多个杂交隔膜时均匀杂交。一套5件(20x20cm)。

### 杂交试管架

在装膜或试管不用时, 这是一种实用的试管存放装置。可装多达3 个大试管和3个小试管。



### 订货编号

产品代码	描述
FHTRACK	HTH-1杂交试管架 (装3个大试管和3个小试管)
FMEM2020	隔膜分离器 200 x 200mm (一套5件)
FHB1/PLAT	振动台 (仅限HB-1D) 0-60opm
FHBSH1	不锈钢网架 (仅限HB-1D)
FHB4SH1	不锈钢网架 (仅限HB-3D)
FHB4/PLAT	振动台 (仅限HB-3D) 0-60 opm
FHB4WALL	Hybrigene HB-3D 培养箱壁固定组件
FHB4DKIT	成套组件, 用于堆放3套 Hybrigene HB-3D 装置的附件

